


Arrow Stainless Cages

アローステンレスケージ

スペースにあわせて組み合わせ自由自在

設置場所に合わせてカスタマイズできる
ステンレス製動物用ケージ

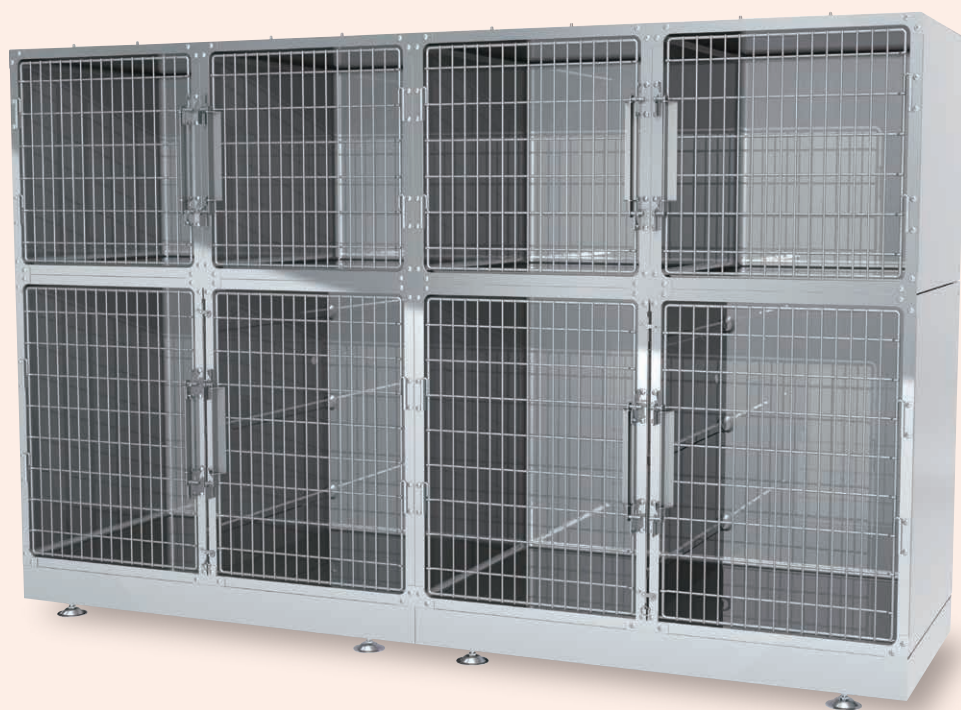

ステンレス入院ケージ

動物たちや飼い主の方の笑顔があふれる
医療環境をご提供しています。

使いやすさを考えたアイデアが細部にわたり盛り込まれています。

アローステンレスケージには、水洗式とドライ式の2タイプがあります。

10種類のキューブから数十種類のユニットが構成可能です。

使いやすさを考えたアイデアが細部にわたり盛り込まれています。

扉を差し換えるだけでネプライザーBOXとしてご使用頂けます。

また、多様なスペースに対応可能で、移動も自由、カバーをつけて単体としても使用出来ます。

さらに汚物が固着しにくく掃除しやすいように、各コーナー部分をすべて曲面で仕上げています。

オートロック
機構式扉(PAT)


増設・移設が
可能な柔軟設計

ドライ式

ドライ式の特徴

- 材料はステンレスSUS(304) 18-8を使用し、各ケージのモジュールは操作性・動物の大きさ・建築物の寸法を基本に設計しています。
- ロックはステンレス製ワンタッチロック。
- 汚物が固着しにくく、拭き取りやすいようにコーナー部を曲面で構成しております。
- ケージは、単体で独立し、それぞれに取り付けたピン付結合用枠および前面の結合プレートにより、相互が強固に結合する耐震構造になっています。
- 多様なスペースに対応でき、病院の長期計画に合わせ増設・移設が可能です。
- 扉はステンレス丸棒を使用、差込丁番はネプライザー用扉への交換が容易です。
- 尿が流出しないように尿止めを設けています。
- 断熱・防音のため、ケージ本体に高質発泡断熱材をつけています。

※製品の使用は改善等により予告無く変更することがあります。
※印刷により製品の色は実際の色と異なる場合があります。

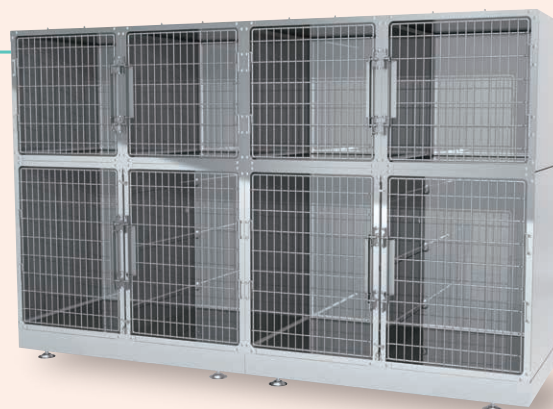


●上記写真はステンレスケージ ACシステムドライ式



写真は柱なしタイプ。真ん中の柱をなくしました。



ロック拡大図

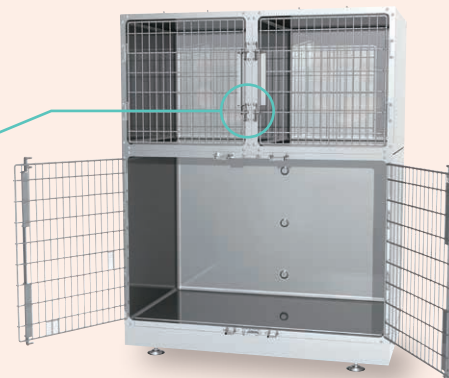

水洗式


水洗式の特徴

- ★水洗式はドライ式の姉妹器で、機能および特色はすべて生かされております。
- ケージの床面は、水捌けを良くするため前方にスロープしています。
- ケージの前面の櫛は、汚れがあふれることのないような構造になっています。

※製品の使用は改善等により予告無く変更することがあります。
※印刷により製品の色は実際の色と異なる場合があります。


●左記写真はステンレスケージ ACシステム 水洗式

写真は水洗式ユニット例
(UNIT 24-A)

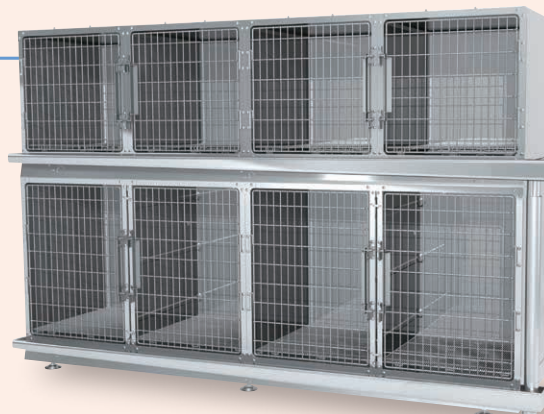

ドライ式・水洗式 寸法表

収納スペースに応じた自由な組合せが可能。

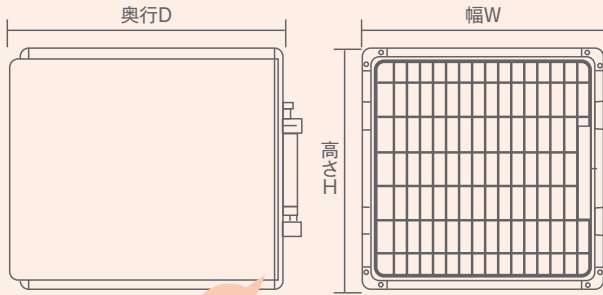

汚水止めリブ
※水洗式にはごさいません。

■扉の方向について
発注の際あらかじめご指定ください。

■オプション
◎寸法はカスタマイズ可能です。ご希望のサイズでお作りいたします。
◎AC-8406以上のゲージは猫用扉にも変更できます。

型式	幅W	高さH	奥行D	備考
AC-8401	420	525	565	
AC-8401-2	840	525	565	中仕切板1枚付属
AC-8402	525	420	565	AC-8401横型
AC-8403	525	525	565	
AC-8404	630	525	565	
AC-8404-2	1260	525	565	中仕切板1枚付属
AC-8405	525	630	565	AC-8404縦型
AC-8406	630	630	705	
AC-8406-2	1260	630	705	中仕切板1枚付属
AC-8407	840	630	705	
AC-8408	630	840	705	AC-8407縦型
AC-8409	840	840	705	
AC-8410	1260	840	705	中仕切板1枚付属
AC-8410S	1260	840	705	柱なし 中仕切板1枚付属
AC-8411	1470	840	705	柱あり 中仕切板1枚付属
AC-8411S	1470	840	705	柱なし 中仕切板1枚付属
AC-8412	1680	840	705	柱あり 中仕切板1枚付属

単位：mm

ドライ式 ユニット例

組合せパターンは一例です。


- ドライ式ケージの設置には保強・保温材使用の為、奥行き**750mm**必要です。
- 扉はオートロック機構(PAT) ●ケージの搬入口は有効寸法で**750mm**必要です。




UNIT 1
W1260×H1570



UNIT 2
W1680×H1570

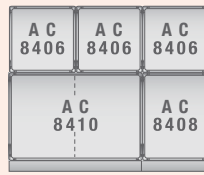


UNIT 3
W1890×H1570

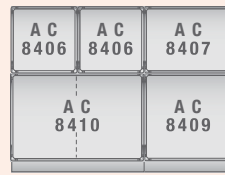


UNIT 4
W2100×H1570




UNIT 5
W1890×H1360

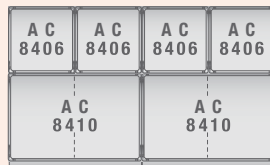

UNIT 8-2
W2520×H1570

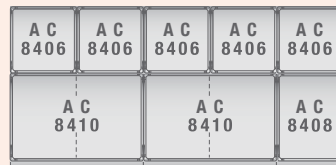


UNIT 12-2
W3150×H1570

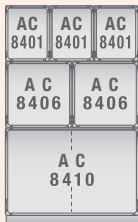

UNIT 6
W1260×H2090



UNIT 7
W2100×H2090

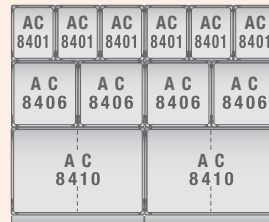


UNIT 8
W2520×H2090




UNIT 9
W2730×H2090



UNIT 10
W1680×H2090

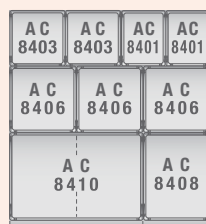

UNIT 11
W1890×H2090

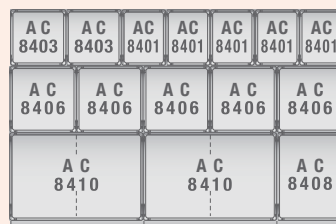

UNIT 12
W3150×H2090




UNIT 13
W1890×H1890

水洗式も
ごさいます。

貴院の収納
スペースに応じて
自由な組合せが
可能です。

オプション (ドライ式・水洗式/共通)

豊富なオプション郡で、より効果的な診断を実現。

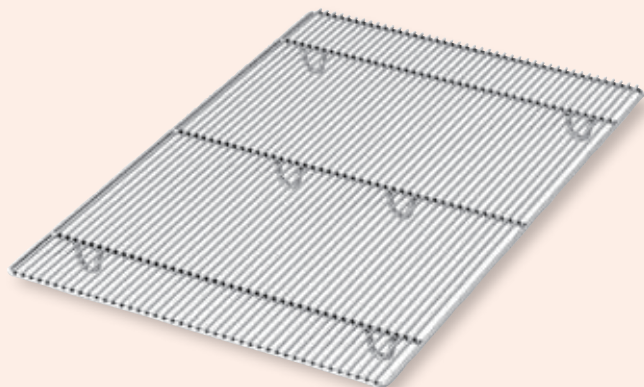

◀ スノコ

ステンレス5φ丸棒を枠組し、ステンレス丸棒を溶接したものです。サイズは7種類のケージに合わせてご用意しています。


▶ ネブライザー扉

透明アクリル板(5mm厚)上に温度計・湿度計・6φ酸素口およびネブライザー口を設け取り付けしたネブライザー用扉。(左右扉が選べます)



▶ ケージ用ヒーター

ケージ内の温度を適温に保ちます。
※ケージ組み立て時に取り付けが必要です。

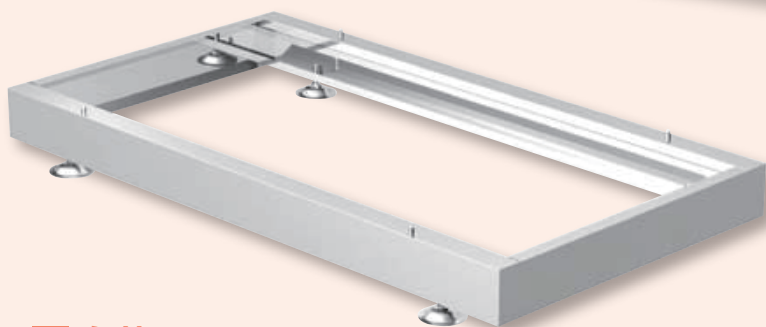

▶ 台枠

- ステンレス製で、レベル調整ができるようになっています。
- ペットが床下に入らないよう四方枠になっています。
- キャスター仕様にも出来ます。

高性能 I C U
ユニットにも
採用されて
おります。

詳しくは、弊社営業まで
お問い合わせ下さい。



アローメディカル 株式会社

〒221-0865 神奈川県横浜市神奈川区片倉4-7-28
TEL: 045-481-7471 FAX: 045-481-7554

アローメディカルコミュニケーションセンター

〒221-0865 神奈川県横浜市神奈川区片倉4-5-31 1F
TEL: 045-481-7379

<http://arrowmedical.co.jp>